

KATALOG IZDELKOV



Stabilo System vakumske
blazine za posturalno
upravljanje



Stabilo je sistem stabilizacijskih blazin in vzmetnic, ki temelji na vakuumski fiksaciji modelirane oblike. Posebna črpalka omogoča izsesavanje zraka iz Stabilo, zaradi česar je blazina trša, hkrati pa ohranja svojo obliko. Obliko in trdoto lahko večkrat spremenimo na zelo preprost način.

Stabilo je zasnovan za ljudi, ki potrebujejo dodatno podporo za ohranjanje drže v sedečem in ležečem položaju ter deluje tako, da kompenzira telesno asimetrijo ali mišično oslabelost. Lahko pomaga stabilizirati medenico, trup, glavo in okončine ter zagotavlja visoko raven udobja, ne glede na postavbo osebe.

Zahvaljujoč možnosti hitrega spreminjanja oblike in široki paleti modelov s široko paleto uporabe, lahko Stabilo zagotovi 24-urno posturalno upravljanje.

Inovativna proizvodna tehnologija in visokokakovostni materiali zagotavljajo brezhibno in dolgo življenjsko dobo. Blazine Stabilo izdelujejo v tovarni v Krakovu na podlagi namenskega sistema vodenja kakovosti.



IZDELKI

6	Base sedež, ki stabilizira medenico	20	Grande vzmetnica	24	Multiseat avtosedež, ortopedski sedež, gugalnica	25	Flat naslon za noge
8	Base Hilo sedež s klinom za stabilizacijo medenice	22	Beanseat modeliran sedež "beanbag".			26	Banana
9	Base Doro sedež s klinom in stranskimi stranicami za stabilizacijo medenice					27	Roll
10	Comfortable naslonjalo za stabilizacijo hrbta					27	Wedge
11	Comfortable Plus steznik hrbtišče						
13	Comfortable Plus Duo sedež - stabilizira glavo, trup in okončine						
15	Comfortable Plus Duo Hilo sedež s klinom za stabilizacijo glave, trupa in okončin						
17	Headrest						
19	Armrest						



29 Bath Bagel



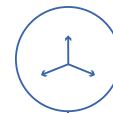
DODATKI

- 30 **Ročna tlačilka**
Electro Vacumaker
Neoprenski trak
Pritrditveni trak
- Shorts**
stabilizira medenico in
omogoča abdukcijo stegen
- 31 **Stabilizacijski telovnik**
Headrest pritrditveni žep
Splint
pritrдитеv naslona za roke
Membranska prevleka
Fleksibilna prevleka s peno
- 32 **Tubo**
Beanroller
transportni voziček



DODATNE INFORMACIJE

- 33 Navodila za uporabo
- 34 Pranje in dezinfekcija
Garancija
Stabilo Velcro
Certifikati



VELIKOST

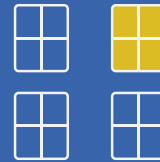
- 36 Stabilo System
Blazine
- 37 Dodatki

START




2000

NOEL



2001

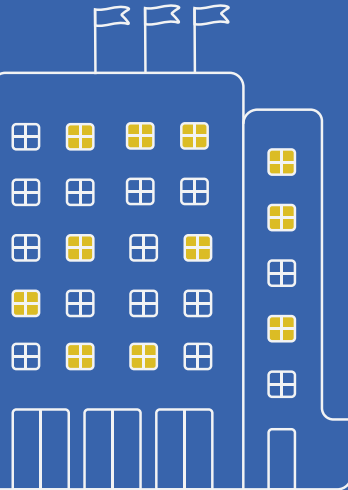REHACARE
INTERNATIONAL



2011



REHABILITATION

FAIR OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION

2009

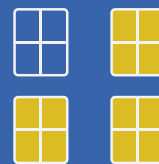
”

Vredni smo zaupanja za vse, ki sodelujejo z nami, saj **poskrbimo, da tudi majhne stvari delujejo odlično**. Sprejemamo izzive. Uporabljamo samo logične rešitve. Hkrati, **skrbimo za zanesljivost in kakovost naših izdelkov**. Izboljšamo komunikacijo in organizacijo storitev za stranke. Zaposlujemo ljudi s širokimi obzorji. Vsak zaposleni ima možnost osebnega razvoja in vpliva na razvoj podjetja.

COMPANY ETHOS



NOEL



2013

COMPANY MISSION

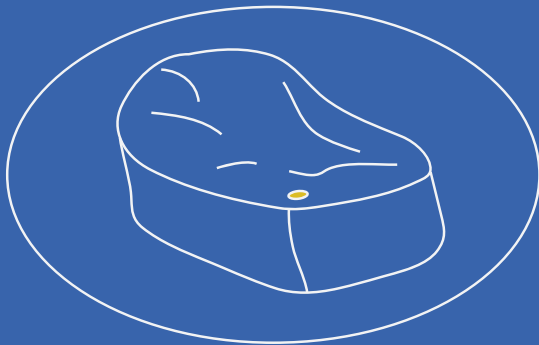
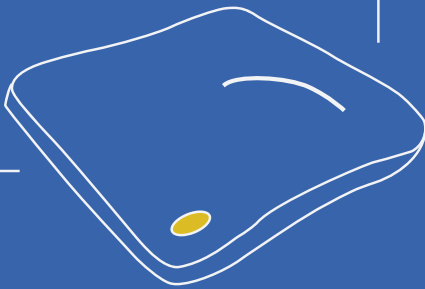
”

Z novimi rešitvami sproščamo energijo in zagotavljamo nove priložnosti za ljudi s posebnimi potrebami po vsem svetu.



THE FIRST STABILO CUSHION

2006



2013

NOEL +



2019



STABILO system



Base

Sedež, ki stabilizira medenico

Base blazina je stabilizacijski in razbremenilni sedež, namenjen ljudem z deformacijami medenice ali asimetrijo kolkov. To blazino je mogoče enostavno oblikovati in oblikovati tako, da ustreza vašim potrebam. Obliko je mogoče ponovno spremeniti.

Lastnosti izdelka



Omogoča profiliranje klina, zagotavlja abdukcijo stegen, prilagojeno anatomiji ljudi z zmanjšano ali povečano napetostjo in mišičnimi kontrakturami.



Omogoča dvig enega od kolkov, omogoča abdukcijo stegen prilagojeno anatomiji ljudi z zmanjšano ali povečano napetostjo in mišičnimi kontrakcijami.



Ta blazina se popolnoma prilega telesu. Zahvaljujoč enakomerni porazdelitvi pritiska zmanjša tveganje za nastanek razjed zaradi pritiska.



Izvedba asimetrične podpore za medenico, dvig enega od bokov poveča udobje sedenja, izboljša stabilnost, še posebej pri osebah z rotacijo kolka.



Z oblikovanjem klančine na sprednji strani blazine in kanalov za priročno nastavitev položaja stegen zagotavlja možnost ustvarjanja položaja vedra. Zlasti otroke lahko spodbudi, da se bolj trudijo ohraniti pravilen položaj trupa, hkrati pa poveča stabilnost in varnost med sedenjem ter prepreči drsenje telesa.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Pritrditveni trak
- Fleksibilna prevleka s peno





Base Hilo

Sedež s klinom za stabilizacijo medenice

Base Hilo blazina je stabilizacijski sedež z izstopajočo zagozdo, ki omogoča abdukcijo nog. Je nadgradnja sedeža Base. Blazina stabilizira uporabnika v sedečem položaju. S postavitvijo spodnjih okončin v nevtralni položaj distančni klin preprečuje kontrakturo adduktorja.

Lastnosti izdelka



Z oblikovanjem valja na sprednji strani blazine in kanalov za priročno nastavitve stegen zagotavlja možnost ustvarjanja položaja vedra. Lahko mobilizira, še posebej otroke, da se bolj trudijo za vzdrževanje pravilnega položaja trupa, hkrati pa poveča stabilnost in varnost med sedenjem ter preprečuje zdrse telesa.



Modelirana oblika blazine zmanjša prekomerni pritisk na kostne elemente med dolgim sedenjem. To zmanjša tveganje za nastanek razjed zaradi pritiska pri ljudeh, ki so bili dolgo časa v enem položaju.



Omogoča asimetrično podporo medenice, kar poveča udobje sedenja pri ljudeh z rotacijo kolkov.



Posebno profiliran klin omogoča, da noge ostanejo v abdukcijem položaju. Je odlična rešitev za ljudi z visoko mišično napetostjo, saj omogoča pravi položaj nog tudi v primeru močne težnje po prekrizanju.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Pritrditveni trakovi
- Fleksibilna prevleka s pena



Base Doro

Sedež s klinom in stranskimi stranicami za stabilizacijo medenice

Base Doro je stabilizacijski sedež z izrazitim klinom, ki omogoča abdukcijo nog in stranskih bokov, ki stabilizirajo celotno medenico. Je nadgradnja blazine Base Hilo. Podstavek Doro omogoča korekcijo kolkov in stabilizacijo celotne medenice. Poleg tega stranski deli blazine segajo nad bočni pas, ga popravljajo in hkrati razbremenijo pritisk.

Lastnosti izdelka



Oblika blazine omogoča večjo kontrolo nad trupom pri uporabnikih, ki občutijo njeno pomanjkanje med sedenjem na običajnih blazinah.



Možnost hkratne korekcije kolkov in stabilizacije celotne medenice daje aktivnim uporabnikom impulz za večjo gibljivost trupa pri vsakodnevni aktivnosti in s tem posredno poveča moč določenih skeletnih mišičnih skupin.



Osebam z izpahom in rotacijo kolka blazina zagotavlja celovito stabilizacijo, preprečuje poslabšanje deformacije, povečuje udobje pri dnevni aktivnosti in pogosto zmanjša bolečino.



Stranske stranice blazine segajo nad kolčni pas in jo tako odlično stabilizirajo v danem položaju ter hkrati korigirajo in razbremenijo pritisk.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka
- Neoprenski trak

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Pritrditveni trakovi
- Fleksibilna prevleka s peno
- Tubo



Comfortable

Naslonjalo za stabilizacijo hrbta

Blazina za stabilizacijo hrbta zagotavlja udobno oporo in hkrati razbremenitev. Spremenljiva oblika daje možnost individualne prilagoditve naslonjala uporabniku, kar omogoča korekcijo napak v drži in s tem izboljša nadzor nad uporabnikovim telesom.

Lastnosti izdelka



Zahvaljujoč možnosti spreminjanja oblike in debeline na zelenem mestu, glede na potrebe posameznika, blazina poveča udobje sedenja za osebe z velikimi deformacijami hrbtenice, miele meningocele spina bifido in asimetrijo telesa.



Anatomska oblika hrbtišča in majhna teža izdelka omogoča enostavno namestitev v invalidski voziček, rehabilitacijski sedež, na stol ali v avtomobil, kar uporabniku zagotavlja udobje med transportom.



Omogoča stabilizacijo in kontrolo telesa, izboljšanje položaja med sedenjem, predvsem pri osebah z zmanjšano ali povečano mišično napetostjo.



Omogoča podporo hrbtu na celotni površini, olajša korekcijo drže, ukrivljenost hrbtenice po celotni dolžini, zmanjša tveganje za razjede zaradi pritiska in draženje pri ljudeh, ki so bili dolgo časa v enem položaju.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Pritrditveni trakovi
- Fleksibilna prevleka s peno
- Tubo



Comfortable Plus

Naslonjalo za podporo trupa in glave

Stabilizacijska blazina za hrbet z dodatnimi bočnimi oporami zagotavlja udoben naslon za hrbet, kar daje tudi možnost popraviljanja napak v drži in izboljšanja nadzora telesa. Široke stranske opore in velik naslon za glavo stabilizirajo pacienta, pomagajo pritrčiti vratni del in zagotavljajo pravilen položaj glave.

Lastnosti izdelka



Zahvaljujoč stranskim oporam in širokemu naslonu za glavo nudi ljudem, ki potrebujejo večjo stabilizacijo trupa, celovito podporo trupa in glave. Comfortable Plus je še posebej primeren za ljudi s cerebralno paralizo, hrbteničnimi ukrivljenostmi in motnjami drže.



Naslonjalo zagotavlja mehko oblikovano podporo za trup in glavo, ki je dopolnilna stabilizacija za ljudi, ki ne prenašajo togih steznikov ali tiste, ki jih že uporabljajo.



Plastična oblika in enostavno oblikovanje omogočata uporabniku spremenljiv položaj, kar povečuje udobje za ljudi, ki že dolgo sedijo.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka
- Neoprenski trakovi

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Pritrditveni trakovi
- Fleksibilna prevleka s peno
- Tubo





Comfortable Plus Duo

Sedež - stabilizira glavo, trup in okončine

Sedež s stranskimi oporami in vzglavnikom združuje funkcije naslona in sedeža. Stabilizira boke in uporabnikom zagotavlja udoben položaj z možnostjo prilagoditve hrbtenične ukrivljenosti, kar omogoča boljšo kontrolo drže.

Lastnosti izdelka



Kombinacija sedeža in naslonjala ustvari samonosni, popolni sedež. Takšna rešitev odlično stabilizira medenico in trup. Zahvaljujoč stabilizaciji, uporabnikom z visoko mišično napetostjo, povečuje udobje in varnost. Pri ljudeh z mišično atrofijo pa sedež omogoča pravilen položaj telesa, kar povečuje stabilnost.



Z oblikovanjem rampe na sprednji strani blazine in kanalov za priročno nastavitve stegen zagotavlja možnost ustvarjanja položaja vedra. Zlasti otroke lahko spodbudi, da se bolj trudijo ohraniti pravilen položaj trupa, hkrati pa poveča stabilnost in varnost med sedenjem ter prepreči drsenje telesa.



Prostorni naslon za glavo pomaga ohraniti pravilen položaj glave. Stranske opore zagotavljajo idealen položaj za uporabnika. Pri ljudeh z ukrivljenostjo hrbtenice je tveganje za deformacije hrbtenice zmanjšano. Ljudem z zmanjšanim nadzorom glave pomaga ohraniti glavo v pravilnem položaju.



Modelirana oblika blazine zmanjša prekomerni pritisk na kostne elemente med dolgim sedenjem. To zmanjša tveganje za preležanine. Možna je tudi namestitvev uporabnika v ležeči ali polležeči položaj. Sedež s klinom za stabilizacijo glave, trupa in okončin Comfortable Plus Duo.



Ta blazina je lahko samostojen sedež ali dopolnilo naslonu in sedežu v invalidskem vozičku, hkrati pa izboljša stabilizacijo drže s pravilnim položajem medenice in uporabnikovega trupa.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka
- Neoprenski trak

Doplačilo

- Elektro tlačilka
- Pritrditveni trakovi
- Fleksibilna prevleka s peno
- Tubo





Comfortable Plus Duo Hilo

Sedež s klinom za stabilizacijo glave, trupa in okončin

Sedežni stol s stranskimi oporami in vzglavnikom, ki združuje funkcije sedeža in hrbtne naslona, je podaljšek sedeža Comfortable Plus Duo. Zmogljiv klin poveča stabilnost kolka in zagotavlja udobno oporo pacientom. Omogoča korekcijo ukrivljenosti hrbtenice in s tem boljšo kontrolo drže. Poseben abdukcijski klin zmanjša kontrakture adduktorjev z nastavitvijo spodnjih okončin v nevtralni položaj.

Lastnosti izdelka



Omogoča asimetrično podporo medenice. Posebno profiliran klin omogoča ohranjanje nog v abdukcijskem položaju, kar povečuje udobje in varnost pri sedenju za ljudi z visoko spastičnostjo, nagnjenostjo k zravnanju in prekrižanju nog. Vključuje tudi potrebo po asimetrični podpori medenice.



Z oblikovanjem klančine na sprednji strani blazine in kanalov za priročno nastavitve stegen zagotavlja možnost ustvarjanja položaja vedra. Lahko mobilizira, še posebej otroke, da se bolj trudijo za vzdrževanje pravilnega položaja trupa, hkrati pa poveča stabilnost in varnost med sedenjem ter preprečuje zdrse telesa.



Zahvaljujoč bočnim oporam in širokemu naslonu za glavo ima možnost večsmerne, asimetrične podpore trupa, kar zmanjšuje tveganje za deformacije hrbtenice. Vključuje tudi potrebo po asimetrični podpori medenice.



S tem, ko podpira celotno hrbtno površino in se prilagaja njihovi obliki, zmanjšuje tveganje za nastanek razjed zaradi pritiska. Uporabniku omogoča ležeče ali polležeče. Sedež-stol s klinastim stabilizatorjem. Stabiliziranje glave, trupa in udov Comfortable Plus Duo Hilo.



Ta blazina je lahko samostojen sedež ali dopolnilo naslonu in sedežu v invalidskem vozičku, hkrati pa izboljša stabilizacijo drže s pravilnim položajem medenice in uporabnikovega trupa.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka
- Neoprenski trakovi

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Pritrditveni trakovi
- Fleksibilna prevleka s peno
- Tubo





Headrest

Naslon za glavo s funkcijo enostavnega modeliranja in prilagajanja. Primerno za večino invalidskih vozičkov in rehabilitacijskih sedežev.

Lastnosti izdelka



Enostavno oblikovan in prilagojen obliki glave poveča udobje med sedenjem ali ležanjem.



Omogoča asimetrično podporo glave, povečuje varnost uporabnika z visoko spastičnostjo, osebam z deformacijami trupa, zmanjšano kontrolo telesa in osebam, ki potrebujejo takšno podporo zaradi spremenljive mišične napetosti.



Popolnoma stabilizira in podpira glavo ter izboljšuje njen nadzor, zlasti pri ljudeh z zmanjšano mišično napetostjo.



Zahvaljujoč posebnemu pritrdilnemu sistemu se prilega večini invalidskih vozičkov in rehabilitacijske opreme ter zagotavlja prilagojeno podporo za glavo ljudem z zmanjšanim nadzorom glave.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka
- Pritrditev za vzglavnik

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Pritrditveni trakovi
- Fleksibilna prevleka s peno
- Tubo





Armrest

Naslon za roke s funkcijo enostavnega oblikovanja in prilagajanja se uporablja v invalidskih vozičkih in rehabilitacijskih sedežih. Omogoča stabilizacijo in optimalen kot podlakti v sedečem in ležečem položaju.

Lastnosti izdelka



Enostavno modeliran in tako prilagojen anatomski obliki roke omogoča korekcijo in stabilizacijo pri ljudeh s povečano mišično napetostjo in kontrakturami roke in zapestja.



V primeru hemiplegije pomaga ohranjati optimalen kot podlakti.



Enostavna montaža naslona za roke omogoča, da je primeren za različne vrste sedežev in invalidskih vozičkov.



Otrokom in odraslim s cerebralno paralizo zagotavlja stabilno oporo za podlaket, kompenzira in lajša prizadetost s stabilizacijo sedečega položaja.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka
- Neoprenski trak

Doplačilo

- Opornica - pritrditev naslona za roke
- Električna tlačilka
- Pritrditveni trak
- Fleksibilna prevleka s peno
- Tubo



Grande

Vzmetnica

Vakuumska pozicionirna vzmetnica je izdelek, ki se z modeliranjem enostavno prilagodi obliki uporabnikovega telesa.

Lastnosti izdelka



Vzmetnica kompenzira in lajša disfunkcije tako, da uporabnika stabilizira v sedečem ali ležečem položaju. Njegova uporaba omogoča pravilen položaj trupa, medenice, zgornjih in spodnjih okončin ter glave.



Ta vzmetnica se lahko uporablja za popravljanje napak v drži. Velik volumen granul in izdatne dimenzije omogočajo natančno prekrivanje celega telesa v stiku z njim. Vzmetnica omogoča udobno ležanje in sedenje osebam s hudimi deformacijami trupa, ki jim onemogočajo udobno ležanje ali sedenje.



Po pravilnem oblikovanju vzmetnica postavi uporabnika v položaj, ki omogoča rehabilitacijske vaje na trebuhu za osebe s povečano ali zmanjšano mišično napetostjo.



Z razporeditvijo telesne teže na veliko površino zmanjša tveganje za nastanek dekubitusa, poleg tega daje možnost mantiranja bolnika.



Lahko se uporablja kot samostojen sedež.



Uporablja se lahko za posedanje uporabnika na njegov kavč ali fotelj, kar ustvari večjo vključenost družin.



Dodatki

Vključeno

- Električna tlačilka
- Zaščitna vreča

Doplačilo

- Membranska prevleka
- Dodatna baterija





Beanseat

Modeliran sedež "beanbag".

Velik ortopedski sedež stabilizira medenico, trup in glavo ter je posebna blazina v obliki pufe. Omogoča namestitev pacienta v globok sedeč ali pol ležeč položaj, kar mu omogoča stabilizacijo celega telesa.

Lastnosti izdelka



Sedež se zaradi svoje velikosti in oblike prilagaja telesu ali po potrebi drži uporabnika v zelenem položaju. Poveča stabilnost in varnost uporabnikov tudi pri visoki mišični napetosti. Ljudem z atrofijo mišic omogoča pravilen položaj telesa in hkrati omejuje nastanek deformacij hrbtenice.



Zaradi velike oporne površine se uporabnik med sedenjem počuti udobno. Ljudem, ki vsakodnevno ležijo, jim daje možnost, da spremenijo svoj položaj iz ležečega v polležečega, kar poveča obseg njihovega doživetja sveta. Beanseat zmanjša tveganje za nastanek razjed zaradi pritiska med sedenjem.



Enostavno oblikovana oblika vam omogoča, da med terapijo postavite uporabnika v pravi položaj, npr. ob delu z logopedom, s čimer pacient lažje sodeluje pri aktivnostih. Blazina je tudi pomemben element krepitve učinkov fizioterapevtske rehabilitacije s postavitvijo uporabnika v zelen pravilen položaj.



Ovisno od stopnje utrjenosti lahko sedež deluje kot trd sedež ali mehka vreča za sedenje, kar daje možnost, da uporabnika postavite v sproščen ali bolj aktiven položaj, odvisno od njegovih potreb in sposobnosti.



Dodatki

Vključeno

- Električna tlačilka
- Zaščitna vreča

Doplačilo

- Membranska prevleka
- Shorts - stabilizirajo medenico in omogočajo abdukcijo stegen
- Beanroller - voziček
- Dodatna baterija
- Tubo





Multiseat

Avtosedež, ortopedski sedež, gugalnica

Kompleksni ortopedski sedež - sedež, ki stabilizira medenico, trup in glavo. Sestavljen je iz treh Stabilo Multiseat blazin, pritrjenih na aluminijasto ogrodje. Popoln je kot varen avtosedež za prevoz oseb s posebnimi potrebami, kot gugalnik za sprostitev - npr. na igrišču - pri rehabilitaciji in kot samostojen ortopedski sedež, ki ga je enostavno pritrčiti na fotelj ali stol.

Lastnosti izdelka



Aluminijasto ogrodje poveča togost blazin in hkrati omogoča prilagajanje ogrodja potrebam uporabnika. Poveča udobje sedenja pri ljudeh z ukrivljenostjo hrbtenice, telesnimi deformacijami različnih etiologij in degenerativnimi spremembami. Pomaga ohranjati pravilen položaj med vožnjo v avtomobilu in preprečuje deformacijo. Za ljudi z zmanjšanim ali pomanjkljivim nadzorom glave zagotavlja varno podporo za glavo.



Tri ločene blazine omogočajo individualno prilagajanje trdote posameznemu delu telesa, zahvaljujoč čemur je možno dinamično stabilizirati izbrane dele telesa.



Multiseat, ki se uporablja kot avtosedež, je bil strogo testiran in odobren s strani ECE R44/04.



Modelirano oblaginjenje omogoča oporo in stabilizacijo hrbta in medenice tudi pri velikih deformacijah in asimetrijah. Notranji sistem trakov, telovnik in odvrtilni trakovi povečujejo varnost ljudi s hudimi spastičnimi stanji in velikimi deformacijami telesa pri sedenju. Ljudem z zmanjšano mišično napetostjo nudi oporo pri sedenju, preprečuje deformacije in motnje drže.



Zahvaljujoč nastavljivemu vzglavniku lahko glavo in vrat hrbtenice pritrčite in stabilizirate. Uporaben je tudi v primeru asimetrične opore za glavo.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka
- Neoprenski trakovi
- Pritrditveni trakovi
- Trakovi za gugalnico
- Nagibna ploščad

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Dodatna baterija
- 12V kabel
- Fleksibilna prevleka s peno
- Shorts - stabilizira medenico in omogoča abdukcijo stegen
- Stabilizacijski telovnik



Flat

Naslon za noge

Vakuumska korekcijska blazina, tip opore za noge, je del terapevtskega fitting sistema. Je popoln dodatek k vsakodnevni rehabilitaciji. Prilagodi se stopalom in jih stabilizira v pravilnem položaju.

Lastnosti izdelka



Popravlja deformacije znotraj stopal. Osebam z deformacijami gležnjev (križno stopalo, stopala obrnjena navznoter, hallux valgus) zagotavlja asimetrično oporo.



Pri osebah, ki potrebujejo stalno rehabilitacijo (nevrogena obolenja s povečano ali oslajeno mišično napetostjo, revmatoidna obolenja ipd.), enostavno oblikovana oblika zagotavlja variabilnost oblike in stopnje otrdelosti, kar omogoča postavitve stopal v želeni terapevtski položaj.



Zagotavlja profilakso za lajšanje pritiska na območju sklepov stopal in gležnjev (predvsem kalcanealnih).



Korigira deformacije stopal in gležnjev pri uporabnikih, ki dolgo ostanejo v enem položaju. Postavitve stopal v želeni terapevtski položaj.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka

Dodatno

- Električna tlačilka
- Neoprenski trakovi
- Pritrditveni trakovi
- Tubo



Banana



Vakuumska banana blazina je del terapevtskega fitting sistema. Dopolnjuje vsakodnevno rehabilitacijo. Uporablja se tudi v primeru potrebe po netipični podpori podlakti.

Lastnosti izdelka



Korigira deformacije v predelu dlani in podlakti ter poveča udobje pri sedenju pri osebah z deformacijami dlani in podlakti.



Enostavno oblikovana oblika omogoča spreminjanje oblike in stopnje utrjevanja, pozicioniranje in stabilizacijo rok v želenem terapevtskem položaju. Kot rezultat, uporabnik invalidskega vozička dobi udobno oporo.



Pri ljudeh s krčenjem mišic in revmatoidnimi obolenji je pomemben za preprečevanje dekubitusa v predelu podlakti.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka

Doplačilo

- Električna tlačilka
- Neoprenski trakovi
- Pritrditveni trakovi
- Tubo



Roll

Vakuumska blazina je večnamenski terapevtski sistem za prileganje. Je odlična rešitev, pomaga pri vsakodnevni rehabilitaciji, odlično dopolnjuje poravnalno terapijo.

Lastnosti izdelka



Uporablja se med motorično rehabilitacijo. Uporablja se lahko za abdukcijo okončin, stabilizacijo telesa in njegovih posameznih delov.



Idealen je za vadbo poravnave ali mlahave bolnike ali z mielomeningokelo, razbremeni posamezne dele telesa.



Uporaben je tudi za zapolnitev vrzeli v sedežih, da se zagotovi bolj podporni položaj.



Wedge

Vakuumska blazina v obliki klina je del terapevtskega fitting sistema, ki pomaga stabilizirati uporabnika med terapijo, rehabilitacijo ali domačo poravnalno terapijo. Popolnoma stabilizira in popravi pacientovo silhueto. Zahvaljujoč uporabi vakuumske tehnologije omogoča oblikovanje poljubne debeline in kota klina.

Lastnosti izdelka



Podpira položaj uporabnika med terapijo in rehabilitacijo v položaju na trebuhu.



Pri ljudeh z motnjami dihal jim omogoča, da zavzamejo udoben ležeči položaj za dihanje.





Bath Bagel

Vakuumski sistem za pozicioniranje Bath Bagel je izdelek, namenjen otrokom in odraslim, ki jim pomaga pri kopanju. Zagotavlja odlično podporo glavi, jo drži nad vodno gladino in preprečuje potopitev. Blazina je udobna in varna za uporabo, zahvaljujoč uporabi posebnega sistema trakov, takrat sila vzgona deluje na prsni koš in ne neposredno na vrat in glavo, razbremeni vratne mišice in tako poskrbi za ustrezno stabilnost, sprostitvev. in varnost med kopanjem.

Lastnosti izdelka



Zagotavlja odlično stabilizacijo glave med kopanjem, kot nalašč za ljudi z nevrološkimi boleznimi, z zmanjšano ali brez kontrole glave, omogoča prosto kopanje brez nevarnosti zadušitve.



Vakuumska oblika in posebej oblikovana oblika v kombinaciji s sistemom pritrdilnih trakov, ki potekajo pod pazduho, zagotavlja udobje in varnost uporabe.



Ima terapevtsko funkcijo za osebe z nevrogenimi obolenji povečane ali zmanjšane napetosti ali boleznimi sklepov, saj izboljša možnost prostega gibanja okončin in trupa v vodi ter omogoča izvajanje vaj. Hkrati preprečuje torzijsko gibanje v vodi in zagotavlja varnost med hidroterapijo.



Lahko se hitro posuši, njegova majhnost in teža pa omogočata, da ga vzamete za obdobje rehabilitacije.



Dodatki

Vključeno

- Ročna tlačilka
- Neoprenski trakovi

Dodatno

- Tubo



Ročna tlačilka

Vakuumska ročna tlačilka se uporablja za oblikovanje majhnih in srednjih blazin. Enostavna in zanesljiva je priložena vsaki majhni do srednji blazini.



Electro Vacuumer™ - Električna tlačilka

Vakuumska električna tlačilka zaradi svoje visoke zmogljivosti olajša oblikovanje velikih Stabilo oblik. Napajalnik 12V zagotavlja varno uporabo in omogoča priklop v vtičnico avtomobilskega vžigalnika. Na voljo je z vzmetnicami Grande in sedežem Beanseat.



Neoprenski trak

Elastičen neoprenski trak pomaga bolje stabilizirati uporabnika v blazini. Zahvaljujoč Velcro površini se lahko pritrdi na blazino na različnih višinah. Vsak model Comfortable Plus in Comfortable Plus Duo je standardno opremljen s takim trakom.



Pritrditveni trak

Univerzalen, nastavljen trak za voziček se uporablja za namestitve blazine v invalidski voziček, fotelj ali stol. Preprečuje premikanje in tako olajša namestitve pacienta v blazino.



Shorts - stabilizirajo medenico in omogočajo abdukcijo stegen

Kratke hlače se uporabljajo za stabilizacijo medenice in zagotavljajo abdukcijo stegen. Uporabljajo se lahko za nastavitve medenice in pomagajo pri ponovni vzpostavitvi pravilne drže. Omogočajo svobodo gibanja bokov navzgor, medtem ko blokirajo gibanje medenice naprej, kar je priporočljivo v primeru velikih spastičnih stanj. S kratkimi hlačami lahko bolje postavite svoje boke v Beanseat tipa Velcro.





Stabilizacijski telovnik

Univerzalni brezrokavnik podpira korekcijo in stabilizacijo trupa ter lahko pomaga preprečiti anverzijo. Štirje regulirani trakovi zagotavljajo boljše prilaganje trupu. Brezrokavnik je izdelan iz lahko pralnega in na natezanje odpornega materiala. Pogosto se uporablja v večsedežnih sedežih.



Pritrditev za vzglavnik

Neoprenski žep omogoča pritrnitev Stabilo Headrest naslona za glavo na različne vrste sedežev in invalidskih vozičkov. Raztegljiv material za enostavno pritrnitev na različne površine.



Opornica - pritrnitev Armrest

Univerzalna podlaga se uporablja za pritrnitev naslona za roke Stabilo. Notranja struktura iz zlitine omogoča pritrnitev baze na številne vrste in dimenzije naslonov za roke.



Membranska prevleka

Fleksibilna prevleka za vzmetnice Grande in Beansseat. Poveča raven higijene. Izdelana z membransko tehnologijo, je neprepustna za tekočine ter prepustna za vodno paro in zrak. Gladek material brez gub je koži prijazen. Material ima antibakterijski certifikat.



Fleksibilna prevleka s peno

Prevleka iz pene, zračna prevleka, ki omogoča večji pretok zraka in zmanjšuje potenje pri visokih temperaturah. Trpežna in prožna tkanina, ki jo je mogoče enostavno odstraniti in oprati. Penasta notranja površina preprečuje drsenje in mečkanje prevleke. Prevleke so namenjene blazinam Base, Headrest, Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo.





Tubo

Tubo je sistem fleksibilnih cevi, ki jih je mogoče pritrditi na blazine za večjo stabilnost in togost v posebej zahtevnih primerih. Pomaga modelirati bolj asimetrične oblike hrbtnega naslonjala in vzglavnika ter povečati togost bočnih in vzglavnih opor. Z uporabo Tuba lahko dosežemo stabilno obliko z manjšo trdoto blazine. Konstrukcija omogoča večkratno upogibanje in spreminjanje oblike. Zunanja Velcro površina omogoča pritrditev na vsako Velcro površino.



Beanroller - wheelbase

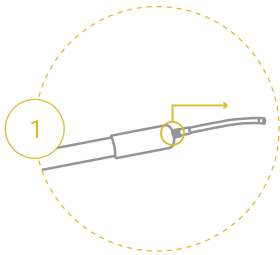
Prenosni voziček za prevoz sedežev Beanseat. Opremljen z oporo za noge in ročajem omogoča enostaven transport pacientov med sobami.






Navodila za uporabo


Ročna tlačilka




1 Izvlecite cev v ročaju črpalke.

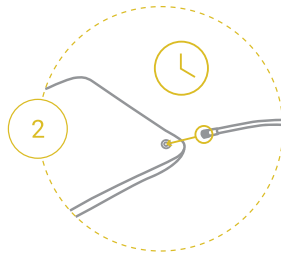

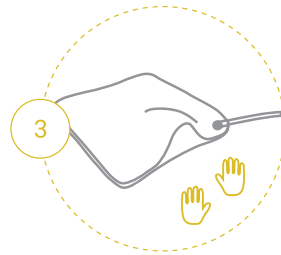
2 Privijte cev v ventil blazine in počakajte, da je blazina dovolj mehka.




3 Vnaprej oblikujte blazino.

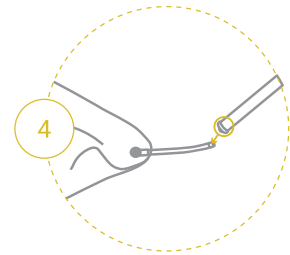

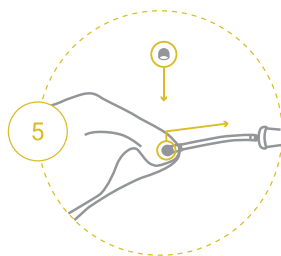4 Privijte črpalke na cev in sesajte zrak, dokler ne dosežete želene trdote.




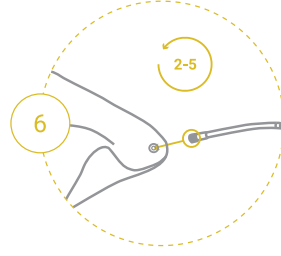5 Odvijte cev črpalke in privijte varnostni pokrov na ventil.




6 Če želite spremeniti obliko, privijte cev v ventil, počakajte, da se blazina zmešča in nato ponovite točke 2 do 5.

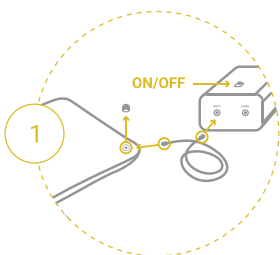
Električna tlačilka



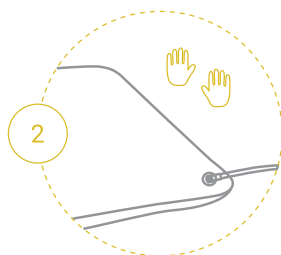
1 Odvijte pokrovček ventila, navojni del cevi privijte v blažilni ventil, drugi del potisnite v SOFT vtičnico in vklopite črpalke. Počakajte, da je blazina dovolj mehka, nato izklopite črpalke.



2 Vnaprej oblikujte blazino.

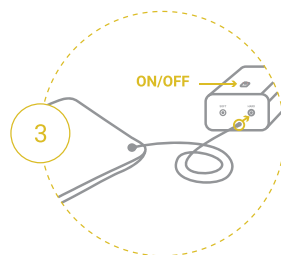

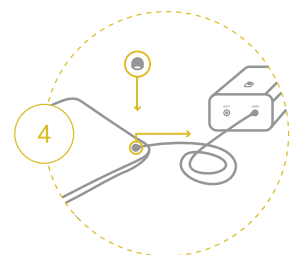3 Spremenite položaj cevi v črpalke iz MEHKEGA v TRDO in jo vklopite, da sesa zrak, dokler ne dosežete želene trdote.




4 Odvijte cev in zaprite pokrov ventila.



Pranje in dezinfekcija

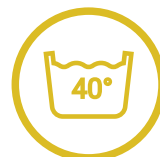Blazine Stabilo so izdelane iz neoprena, prevlečenega z najlonsko tkanino. So zelo trpežne in popolnoma vodotesne. Perete jih lahko pod tekočo vodo, v kadi ali v pralnem stroju do 40°C z umetnimi detergenti. Možna je uporaba dezinfekcijskih pripravkov za dezinfekcijo medicinskih oblačil. Po pranju vzglavnik ohrani svoje dimenzije in lastnosti.



Garancija

Za vsako blazino Stabilo System Cushion kot medicinski pripomoček velja 24-mesečna garancija. Po preteku tega roka nudimo storitev popravila.

Stabilo Velcro

Izdelek Stabilo v različici Velcro nakazuje, da je površina hrbtne blazine izdelana iz mehkega materiala Velcro. Takšna rešitev omogoča njeno pritrditev, pritrditev drugih predmetov, kot so pritrdilni trakovi ali na fiksno sedežno garnituro. Vse Comfortable Plus, Comfortable Plus Duo, Bath Bagel, Wedge, Roll, Flat, Banana so vedno izdelane v različici Velcro. Druge izdelke lahko po želji naročite kot Velcro.

Certifikati



Materiali, uporabljeni v Stabilo System Cushion, so certificirani kot antibakterijski.



Multiseat, ki se uporablja kot avtosedež, je odobren ECE R44/04.



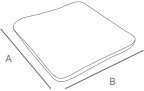
Materiali, uporabljeni za Stabilo System Cushion, so certificirani kot negorljivi.




Materiali, uporabljeni za Stabilo System Cushion, so brez lateksa.




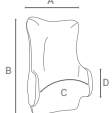
Naziv	TIP	Standard ID	Velcro ID	Dimenzije [cm]			
				A	B	C	D

Base							
	S	2990583	2990583/V	25	38		
	S+	2990585	2990585/V	35	35		
	M	2990584	2990584/V	40	40		
	M+	2991160	2991160/V	45	45		
	L	2990586	2990586/V	50	50		


Base Hilo							
	S		2990776/V	25	38		
	S+		2990777/V	35	35		
	M		2990778/V	40	40		
	M+		2990779/V	45	45		
	L		2990780/V	50	50		


Base Doro							
	S		2990798/V	25	30	21	14
	S+		2990799/V	35	35	23	18
	M		2990800/V	40	40	27	20
	M+		2990801/V	45	45	30	29


Comfortable							
	S	2990587	2990587/V	52	40		
	M	2990588	2990588/V	56	50		
	L	2990589	2990589/V	70	50		

Comfortable Plus							
	S		2991031/V	30	50	58	28
	M		2991032/V	35	60	65	28
	L		2991033/V	40	75	75	35
	XL		2991034/V	45	75	85	35


Comfortable Plus Duo							
	S		2991035/V	30	80	58	28
	M		2991036/V	35	95	65	28
	L		2991037/V	40	115	75	35
	XL		2991038/V	45	120	85	35
	XXL		2990795/V	50	140	95	35


Comfortable Plus Duo Hilo							
	S		2990781/V	30	80	58	28
	M		2990782/V	35	95	65	28
	L		2990783/V	40	115	75	35
	XL		2990784/V	45	120	85	35
	XXL		2990797/V	50	140	95	35


Headrest							
	M		2990618/V	15	30	14	
	L		2990708/V	20	35	17	


Armrest							
	M		2991261/V	20	30		
	L		2991262/V	25	45		


Naziv	TIP	Standard ID	Velcro ID	Dimenzije [cm]			
				A	B	C	D


Grande							
	M	2990872	2990872/V	70	160		
	M+	2991163	2991163/V	90	200		
	L	2990591	2990591/V	130	200		

Beanseat							
	M	2991281	2991281/V	60	80	50	40
	L	2991282	2991282/V	70	100	70	50
	XL	2990796	2990796/V	70	100	100	80


Multiseat							
	M	2991296		38	35	53-62	49-58
	L	2991297		42	40	73-82	69-78


Flat							
	M		2990745/V	80	50	6	
	L		2990746/V	100	50	8	

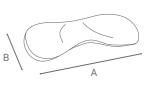
Banana							
	S		2990737/V	50	25		
	M		2990738/V	55	35		
	L		2990739/V	80	35		

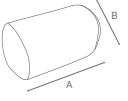Roll							
	S		2990740/V	50	25		
	M		2990741/V	50	35		
	M+		2990742/V	80	18		
	L		2990743/V	80	25		
	XL		2990744/V	80	35		


Wedge							
	M		2990611/V	40	40	25	
	L		2990613/V	45	60	40	

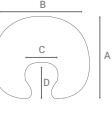Bath Bagel							
	S		2990755/V	30	35	10	12
	M		2990754/V	35	37	12	17
	M+		2990768/V	45	55	12	17
	L		2990723/V	45	60	17	22

Hand pump							
	U	2990641					

Electric pump							
	U	2990605					

Carlighter's cable							
	U	2990606					

Battery pack							
	U	2990607					



AZ REHA

REHABILITACIJSKI PRIPOMOČKI



AZ REHA
Cesta na Ostrožno 106
+386 70 521 390
www.az-reha.si
info@az-reha.si

Stabilo - Systems blazine najdete na:

